


Periuță de Dinți Electrică Sonică

Funcționare cu baterii

GTS2000

Dr. Mayer
LIFE & HEALTH

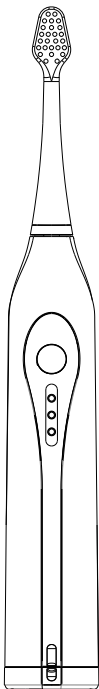

Important și avertismente


Periuța de dinți electrică Sonică SonicDent a fost concepută cu grijă pentru a vă oferi dvs. și familiei dvs. o nouă și unică experiență de periaj care este atât sigur, cât și eficient. Totuși, atunci când folosiți produse electrice, trebuie urmate întotdeauna măsuri de precauție de bază.

Vă rugăm să citiți cu atenție înainte de utilizare:

- În cazul în care produsul nu mai funcționează, nu îl dezmembrați, schimbați sau manevrați vreo parte a acestuia. În caz contrar, există riscul de șoc electric. Duceți-l la un centru de service.
- Folosiți doar baterii alcaline de mărimea A-A pentru acest produs.
- Acest produs nu este destinat a fi utilizat de către copii sub vârsta de trei ani.
- Dacă produsul este scăpat din mână, capul periuței trebuie înlocuit înainte de următoarea utilizare chiar dacă nu prezintă deteriorări vizibile.
- Scoateți bateriile dacă dispozitivul nu va fi folosit pentru o perioadă de o lună sau mai mult.
- Nu scufundați dispozitivul (mănerul) în apă și nu puneți niciodată mănerul în mașina de spălat vase.

2


Descriere generală

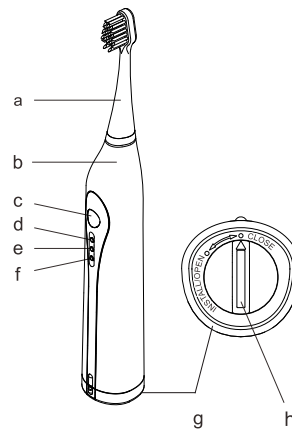

- a. - Capul periuței
- b. - Măner
- c. - Butonul de pornire/oprire a modului de periaj
- d. - Indicatorul modului de funcționare standard
- e. - Indicatorul modului de funcționare sensibil
- f. - Indicatorul modului de funcționare cu masaj
- g. - Capacul spațiului pentru baterii
- h. - Clapeta capacului spațiului pentru baterii

3

Pregătirea pentru utilizare

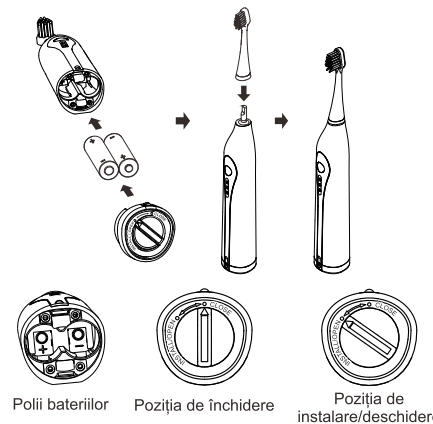

Asigurați-vă că mâinile și dispozitivul sunt uscate atunci când introduceți bateriile.
SonicDent funcționează cu două (2) baterii alcaline de mărimea A-A de 1,5 V.

1. Îndepărtați capacul spațiului pentru baterii prin rotirea clapetei în direcția invers acelor de ceasornic.
2. Asigurați-vă că polii + și - ai bateriilor se potrivesc locației corespunzătoare din interiorul mănerului.
3. Introduceți bateriile în măner utilizând polaritatea corectă.
4. Apăsăți ferm capacul spațiului pentru baterii pe mâner și rotiți clapeta spațiului pentru baterii în poziția „Închis”.


4

Utilizarea periutei de dinți electrice sonice SonicDent

Atașați un cap de periută de mâner. Puteți folosi orice fel de pastă de dinți. Pentru a evita împroșcarea, îndreptați capul periutei către dinți înainte de a porni dispozitivul.

Tehnici de periaj

- ▶ Îndreptați capul periutei ușor de la un dinte la altul.
- ▶ Țineți capul periutei nemișcat pentru câteva secunde înainte de a trece la următorul dinte.
- ▶ Periați gingiile, la fel ca și dinții, mai întâi părțile exterioare și apoi cele interioare, apoi suprafețele de masticație.

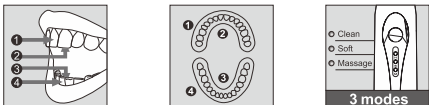

- ▶ Nu apăsați prea tare și nu frecați, lăsați pur și simplu periută să își facă treaba.

Moduri de periaj

- ▶ SonicDent oferă trei moduri diferite de periaj pentru diverse necesități orale:
- ▶ **Standard** - Curățare excepțională a gurii
- ▶ **Sensibil** - Curățare sensibilă, însă completă, pentru zonele sensibile
- ▶ **Masaj** - Stimulare ușoară a gingiilor

Cronometru de două minute

SonicDent este destinată a atinge durata de periaj dovedită și cea mai bună (două minute) după două minute de periaj, dispozitivul se oprește în mod automat, la fiecare 30 de secunde dispozitivul vă va alerta să schimbați zona de periaj. În general, oamenii împart dinții și gingiile în 4 zone de periaj.

Cum să schimbați modurile de periaj

- ▶ Pornirea / oprirea și selectarea modurilor de periaj sunt controlate prin apăsarea unică a butonului, acesta fiind denumit butonul de pornire / oprire pentru modul de periaj (c). Atunci când continuați să apăsați acest buton, secvența de funcționare se schimbă între modul << Standard >> - modul << Sensibil >> - modul << Masaj >> - oprire.
- ▶ SonicDent începe automat modul << Standard >> atunci când apăsați butonul de pornire / oprire al modului de periaj o singură dată.
- ▶ Pentru a trece de la modul << Standard >> la modul << Sensibil >>, apăsați încă o dată butonul de pornire / oprire al modului de periaj.
- ▶ Dacă doriți să utilizați modul << Masaj >>, apăsați încă o dată butonul de pornire / oprire al modului de periaj.
- ▶ Atunci când apăsați butonul de pornire / oprire al modului de periaj, indicatorul modului de periaj va fi aprins, veți ști ce mod selectați și periați.
- ▶ Pentru a opri periută, apăsați butonul de pornire / oprire și modului de periaj, dacă mânerul funcționează în modul << Standard >>, trebuie să apăsați butonul de trei ori pentru a opri dispozitivul. Dacă mânerul periutei funcționează în modul << Sensibil >>, trebuie să apăsați butonul de două ori pentru a opri dispozitivul. Dacă mânerul periutei funcționează în modul << Masaj >>, trebuie să apăsați butonul o dată pentru a opri dispozitivul.

Garanții și Înlocuire

Garanții:

- ▶ Oferim un an garanție pentru produs începând de la data cumărării. În timpul perioadei de garanție, vom remedia, fără vreun cost suplimentar, orice defecte ale dispozitivului care rezultă din defecte ale materialului sau de fabricație, fie prin repararea sau înlocuirea completă a dispozitivului, după cum vom alege.
- ▶ Garanția nu acoperă: capetele periutei, deteriorări din cauza utilizării necorespunzătoare, uzurii sau utilizării normale, în special în ceea ce privește capul periutei, precum și defecte care au un efect neglijabil asupra valorii de funcționare a dispozitivului. Garanția devine nulă dacă sunt întreprinse reparații de către persoane neautorizate.

Înlocuirea:

- ▶ Se recomandă înlocuirea capului periutei de dinți electrice sonice SonicDent la fiecare 3 luni pentru a obține rezultate optime.
- ▶ Folosiți doar capete de schimb de periute de dinți sonice cu modelul SonicDent.
- ▶ Pentru cele mai bune rezultate, înlocuiți bateriile în fiecare lună și folosiți bateriile vechi în alte dispozitive nemecanice, ex: produse video și audio.

Dr. Mayer Life and Health

E-mail: office@doctor-mayer.com
Web: www.doctor-mayer.com

