


waterpik®

Waterpik® Duș Bucal și Periuța de Dinți Sonică Model WP-900

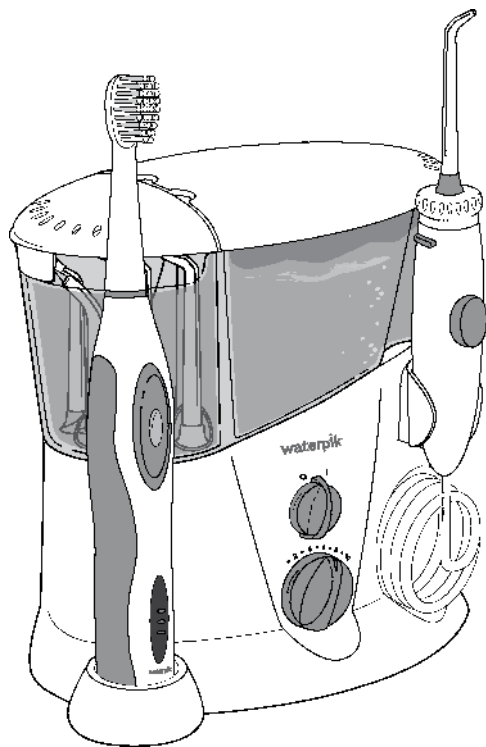

.....
www.waterpik.com

CUPRINS

Măsuri de protecție importante	3
Descrierea produsului	5
Noțiuni de Bază privind Dușul Bucal	6
Curățarea și Repararea Dușului Bucal Waterpik®	7
Garanție Limitată pentru Doi Ani pentru Dușul Bucal	8
Noțiuni de Bază privind Periuța de Dinți Sensonic®	9
Îngrijirea Periuței de Dinți Sensonic® Professional Plus	10
Garanție Limitată pentru Doi Ani pentru Periuța de Dinți Sensonic® Professional Plus	11

MĂSURI DE PROTECȚIE IMPORTANTE

Atunci când utilizați produse electrice, mai ales atunci când sunt prezenți copii, trebuie respectate întotdeauna precauțiile de siguranță de bază, inclusiv următoarele:

CITIȚI TOATE INSTRUCȚIUNILE ÎNAINTE DE UTILIZARE.

ATENȚIE:

Pentru a reduce riscul de electrocutare:

- Nu manevrați ștecherul cu mâinile ude.
- Nu îl puneți sau scăpați în apă sau alt lichid.
- Nu îl utilizați în timp ce faceți baie.
- Nu așezați sau depozitați produsul într-un loc de unde poate cădea sau poate fi tras într-o cadă sau chiuvetă.
- Nu vă întindeți după un produs care a căzut în apă. Scoateți-l imediat din priză.
- Verificați cablul de alimentare pentru deteriorări înainte de prima utilizare și pe parcursul duratei de viață a produsului.


AVERTISMENT:

Pentru a reduce riscul de arsuri, electrocutare, incendiu sau vătămarea persoanelor:

- Nu conectați acest aparat într-un sistem de tensiune care este diferit de sistemul de tensiune specificat pe dispozitiv sau încărcător.
- Nu utilizați acest produs dacă are un cablu sau ștecher deteriorat, dacă nu funcționează corect, dacă a fost scăpat pe jos sau deteriorat sau a căzut în apă. Contactați Water Pik Inc. sau distribuitorul local care poate fi găsit la www.waterpik.com.
- Nu direcționați apa sub limbă, în ureche, nas sau alte zone delicate. Acest produs este capabil să producă o presiune care poate cauza daune serioase în aceste zone.
- Nu direcționați apa în nas sau ureche. Bacteria *Naegleria fowleri*, poate fi prezentă în apa de la robinet (anumite zone) sau apă care nu a fost bine dechlorinată și poate fi fatală dacă este direcționată în aceste zone.
- Utilizați acest produs numai cum se indică în aceste instrucțiuni sau se recomandă de către un profesionist dentar.
- Utilizați numai vârful și accesorii recomandate de Water Pik, Inc.
- Nu scăpați și nu introduceți obiecte străine în vreun furtun sau vreo deschidere
- Țineți cablul electric departe de suprafețe încălzite.

- Nu utilizați Dușul Bucal sau Periuța de Dinți Sonică în aer liber și nu îl folosiți în locuri în care se folosesc aerosoli (spray) sau în locuri în care se administrează oxigen.
- Nu folosiți iod, clor sau uleiuri esențiale concentrate insolubile în apă în Dușul Bucal. Utilizarea acestora poate reduce performanța produsului și va scurta durata de viață a produsului
- Umpleți rezervorul Dușului Bucal doar cu apă sau o altă soluție recomandată de un medic stomatolog.
- Îndepărtați orice bijuterie orală înainte de utilizarea Dușului Bucal sau Periuței de Dinți Sonice.
- Nu utilizați Dușul Bucal sau Periuța de Dinți Sonică dacă aveți o rană deschisă pe limba sau în gură.
- În cazul în care medicul dumneavoastră sau un cardiolog v-a sfătuit să luați premedicație cu antibiotice înainte de procedurile stomatologice, trebuie să vă adresați medicului dentist înainte de a utiliza Dușul Bucal sau Periuța de Dinți Sonică sau orice alt ajutor de igienă orală.
- Acest produs este conform cu standardele de siguranță pentru dispozitivele electromagnetice. Dacă aveți un stimulator cardiac sau alte dispozitive implantate care conțin magneti sau elemente electronice, contactați medicul sau producătorul dispozitivului înainte de a utiliza Periuța de Dinți Sonică.
- Este necesară supravegherea atentă atunci când acest produs este folosit de, pe sau în apropierea copiilor sau persoanelor invalide.
- Dacă vârful Pik Pocket™ (care nu este inclus în toate modelele) se separă de tijă din orice motiv, aruncați vârful și tijă și înlocuiți-l cu noul vârf Pik Pocket™.
- Nu utilizați Dușul Bucal pentru mai mult de 5 minute în fiecare perioadă de două ore.
- Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.
- Pentru probleme electrice contactați un electrician calificat. Nu încercați să modificați ștecherul sau cablul de alimentare.
- Acest produs nu conține piese care pot fi reparate de utilizator în mânerul periuței de dinți sau unitatea Dușului Bucal. Nu încercați să deschideți vreun component cu excepția situației pentru eliminarea bateriei. A se vedea pagina 10, "Eliminarea bateriei".
- Utilizarea unei paste de dinți care conține bicarbonat de sodiu sau peroxid, precum și a substanțelor de curățare abrazive sau chimice pot deteriora carcasa de plastic a acestui produs.

PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI.

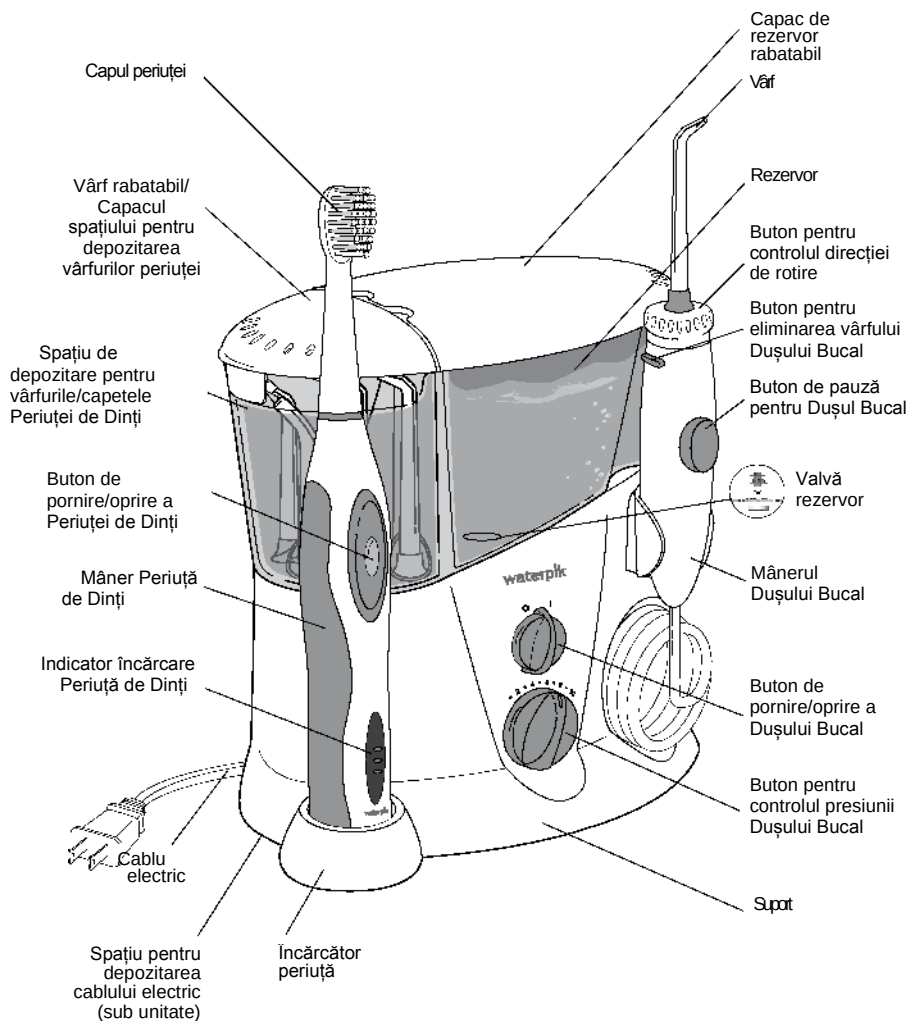

Replace Every 3 Months	
Vârf Ortodontic	POTRIVIT PENTRU Aparat dentar Uz general
Vârf Pik Pocket®	POTRIVIT PENTRU Pungi parodontale Furcații
Vârf Plaque Seeker®	POTRIVIT PENTRU Implanturi Punți Coroane Uz general
Cap Periută Sensonic® Standard	POTRIVIT PENTRU Îndepărtarea Plăcii
Cap Periută Sensonic® Compact	PENTRU Îndepărtarea Plăcii

Conectarea Unității

Conectați cablul la o priză electrică. În cazul în care priza este controlată de un comutator de perete, asigurați-vă că este pomită.

Pregătire și Utilizare

Consultați Ghidul pentru Începere Rapidă pentru instrucțiuni de utilizare corespunzătoare.

La Final

Opriti unitatea. Goliți orice lichid rămas în rezervor. Scoateți unitatea din priză.

NOTĂ: Dacă ați folosit apă de gură sau alte soluții în afară de apă, consultați secțiunea "Utilizarea Apei de Gură sau Alte Soluții".

Se înlocuiește la fiecare 6 luni	
Vârf cu Jet Clasic	POTRIVIT PENTRU Uz general
Vârf pentru Curățat Limba	POTRIVIT PENTRU Respirație Proaspătă

NOTĂ: Nu toate vârfulle sunt incluse în toate modelele.

FOLOSIREA VÂRFURILOR

Vârf Pik Pocket™

Vârful Pik Pocket® este conceput special pentru a direcționa apă sau soluții antibacteriene în interiorul pungilor parodontale.

Pentru a folosi Vârful Pik Pocket®, setați unitatea la cea mai joasă presiune.

Așezați vârful moale pe un dinte la un unghi de 45 de grade și așezați vârful ușor sub gingie, în pungă. Pomiți unitatea și continuați să o deplasați de-a lungul gingiei.



Vârf pentru Curățarea Limbii

Pentru a folosi vârful pentru curățarea limbii, setați cea mai mică presiune, așezați vârful pe mijlocul limbii, la jumătate față de partea din spate și pomiți Dușul Bucal. Trageți spre înainte cu o presiune ușoară. Măriți presiunea după preferințe.



Vârf Ortodontic

Pentru a folosi Vârful Ortodontic, glisați ușor vârful pe gingie, cu pauze scurte pentru a peria ușor zona dintre dinți și din jurul aparatului dentar, înainte de a trece la următorul dinte.

Vârful Plaque Seeker®

Pentru a folosi vârful Plaque Seeker®,



așezați vârful

aproape de dinți astfel încât peri să atingă ușor dinții. Glisați ușor vârful pe linia gingiei, cu pauze scurte între dinți pentru un periaj ușor și pentru a permite apei să treacă printre dinți.

Utilizarea Apei de Gură și a Altor Soluții Dușul Bucal Waterpik® poate fi utilizat cu apă de gură sau alte soluții antibacteriene. După folosirea oricărei soluții speciale, curățați unitatea pentru a preveni blocarea prin umplerea parțială a rezervorului cu apă caldă și punerea în funcțiune a unității cu vârful îndreptat spre chiuvetă până când unitatea este goală.



Curățare

Înainte de curățare, deconectați-l de la priza electrică. Curățați produsul atunci când este necesar cu o cârpă moale și ușoară neabrazivă.

Compartimentul pentru accesorii și rezervorul de apă sunt detașabile pentru o curățare ușoară și pot fi spălate în compartimentul de sus al mașinii de spălat vase.

NOTĂ: Îndepărtați valva rezervorului înainte de a pune rezervorul în mașina de spălat vase.



Îndepărtare



Înlocuire

Îndepărtarea Depunerilor de Apă

Dură Adăugați 2 lingurițe de oțet alb la un rezervor plin cu apă caldă. Setati presiunea la un nivel înalt, îndreptați mânerul și vârful spre chiuvetă. Pomiți aparatul și lăsați-l să funcționeze până când rezervorul este gol. Clătiți prin repetarea cu un rezervor plin de apă caldă curată.

Scurgere


Dacă apar scurgeri din cauza unui furtun deteriorat, furtunuri și mânere de înlocuit pot fi achiziționate de la

www.waterpik.com sau contactând serviciul pentru clienți Water Pik Inc. pentru un set de reparație. Dacă apar scurgeri din rezervor, asigurați-vă ca valva este cu partea dreaptă în sus sau contactați serviciul clienți Water Pik Inc. pentru o valvă de înlocuit.



Spațiu pentru Stocarea Cablului de Alimentare

După determinarea lungimii necesare a cablului de alimentare, împingeți cablul suplimentar în cavitatea de pe partea inferioară a aparatului și introduceți cablul în fantele de reținere.

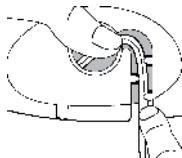

Service

Dușurile Bucale Waterpik® nu au elemente electrice care pot fi reparate de client și nu necesită întreținere regulată. Pentru accesorii consultați www.waterpik.com.

Perioada este de 2 ani de la data achiziționării.

Consumatorul va fi obligat să prezinte factura/chitanța de cumpărare inițială ca dovadă a datei de achiziție și dacă se solicită, produsul întreg, pentru a susține o cerere de garanție. Water Pik Inc va înlocui, la discreția sa orice parte a produsului, care, în opinia sa, este defectă, cu condiția ca produsul să nu fi fost utilizat abuziv, necorespunzător, modificat sau deteriorat după cumpărare, să fi fost folosit conform instrucțiunilor și să fi fost folosit doar cu accesorii sau piese consumabile aprobate de Water Pik Inc. Instalarea este responsabilitatea consumatorului și nu este acoperită de garanție. Această garanție limitată exclude accesorii sau piese consumabile, cum ar fi vârfuri, etc.

Încărcarea Periuței de Dinți Sensonic® Professional Plus

Încarcați-o pentru 24 de ore înainte de prima

utilizare. Toate cele 3 indicatoare luminoase vor rămâne aprinse continuu atunci când unitatea este complet încărcată. O încărcare completă va dura aproximativ 1 săptămână pentru o utilizare regulată (2 minute de periaj de două ori pe zi).

Dacă periuța de dinți trebuie să fie depozitată pentru o perioadă îndelungată de timp (șase luni sau mai mult), asigurați-vă că este încărcată complet înainte de depozitare.

Indicatoarele Luminoase de Încărcare

Indicatoarele luminoase de încărcare vor indica nivelul de încărcare al bateriei pentru aproximativ 10 secunde după utilizare și după îndepărtarea din baza de

încărcare, iar apoi se vor stinge.

Încărcat complet

2/3 încărcat

1/3 încărcat


(se recomandă reîncărcarea)

Aparatul nu va funcționa în cazul în care LED-ul de jos începe să clipească rapid.

Pentru ca periuța de dinți să înceapă să funcționeze din nou, aceasta trebuie să fie pusă pe încărcător pentru aproximativ 1 oră.


Periaj Sonic

- Glisați capul periuței pe mâner și apăsați-l în jos cu putere.
- Așezați capul periuței în gură înainte de a porni unitatea.
- Apăsați butonul o dată pentru o viteză joasă și de două ori pentru o viteză ridicată.
- Dacă țineți apăsat butonul ON / OFF în timpul periajului ce în se află în viteză scăzută periuța se va opri.
- Pentru cele mai bune rezultate, așezați periuța pe gingii la un unghi de 45 de grade.
- Utilizați presiunea scăzută cu o mișcare ușoară înainte și înapoi care acoperă unul sau doi dinți la un moment dat.
- **Cronometru pentru Zone:** Periuța de dinți Sensonic® Professional Plus va avea o scurtă pauză la fiecare 30 de secunde, pentru a vă reaminti să treceți la următoarea zonă din gură.
- **Cronometru de 2-Minute:** Periuța se oprește automat după 2 minute de funcționare.

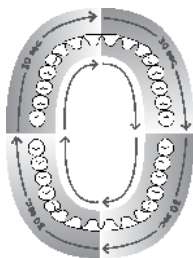


Curățare

1. După fiecare utilizare, opriți aparatul, îndepărtați capul periutei de pe mâner și curățați periuta sub jet de apă.
2. Ștergeți mânerul după fiecare utilizare.

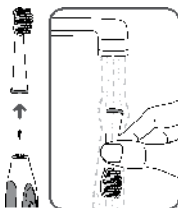


1. Folosiți o monedă sau un disc pentru a roti capul în sensul invers acelor de ceasorinic până când acesta iese.

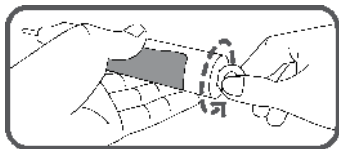

Service

Periutele de dinți Waterpik® nu au elemente electrice care pot fi reparate de client și nu necesită întreținere regulată. Pentru accesorii consultați www.waterpik.com.

2. Împingeți puternic în jos greu cu axul pe o suprafață dură.

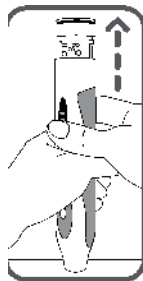

Aruncare


Acest produs conține baterii reîncărcabile Nickle NiMH. Bateriile nu sunt înlocuibile. Vă rugăm să nu aruncați aparatul în gunoiul menajer. Scoateți bateriile conform instrucțiunilor de mai jos și reciclați-le la centrul local de reciclare.

Eliminarea Bateriei

Notă: Acest proces nu este reversibil


Scoateți bateria doar la sfârșitul duratei de viață a produsului pentru reciclare. Făcând acest lucru mai devreme va distruge produsul. Diminuați gradul de încărcare al bateriei până când peria nu mai funcționează. Respectați măsurile de siguranță. Scoateți bateriile conform indicațiilor, reciclați-le împreună cu restul produsului conform reglementărilor locale.

3. Scoateți capacul și trageți corpul

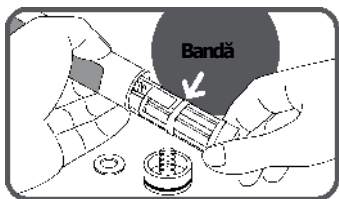

intern. Tăiați banda și îndepărtați-o.

4. Ridicați pachetul de baterii și tăiați firele bateriei pe rand, pentru a le scoate din circuit.

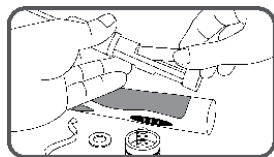

PERIUȚĂ DE DINȚI SENSONIC® PROFESSIONAL PLUS GARANȚIE LIMITATĂ PENTRU DOI ANI

Perioada este de 2 ani de la data achiziționării.
Consumatorul va fi obligat să prezinte factura/chitanța de cumpărare inițială ca dovadă a datei de achiziție și dacă se solicită, produsul întreg, pentru a susține o cerere de garanție. Water Pik Inc va înlocui, la discreția sa orice parte a produsului, care, în opinia sa, este defectă, cu condiția ca produsul să nu fi fost utilizat abuziv, necorespunzător, modificat sau deteriorat după cumpărare, să fi fost folosit conform instrucțiunilor și să fi fost folosit doar cu accesorii sau piese consumabile aprobate de Water Pik Inc. Instalarea este responsabilitatea consumatorului și nu este acoperită de garanție. Această garanție limitată exclude accesorii sau piese consumabile, cum ar fi vârfuri, etc..



Water Pik, Inc.

1730 East Prospect Road

Fort Collins, CO 80553-0001 USA

www.waterpik.com

Waterpik® este o marcă înregistrată a Water Pik Inc., înregistrată în Argentina, Australia, Benelux, Canada, Chile, China, Hong Kong, India, Japonia, Coreea, Mexic, Noua Zeelandă, Norvegia, Pakistan, Federația Rusă, Singapore, Africa de Sud, Elveția, Taiwan, Ucraina și Statele Unite ale Americii.

Waterpik® (stilizat) este o marcă înregistrată a Water Pik Inc. înregistrată în Australia, Brazilia, Canada, China, UE, Hong Kong, Japonia, Mexic, Coreea, Federația Rusă, Elveția, Trinidad & Tobago și Statele Unite ale Americii.

Sensonic® este o marcă înregistrată a Water Pik Inc. înregistrată în Canada, China, UE, Japonia, Elveția și Statele Unite.

Pik Pocket™ este o marcă înregistrată a Water Pik, Inc.

Placa Seeker® este o marcă înregistrată a Water Pik, Inc în Canada, China, UE și Statele Unite ale Americii.

Dușul Bucal® este o marcă înregistrată a Water Pik, Inc în Canada, China, Mexic, Elveția și Statele Unite ale Americii.

Proiectat în Statele Unite ale Americii. Fabricat în China